

歯 ブラ シ



タフト24 100円(キャップ付き 120円)

当医院でも使用しています！

価格も手頃で、毛先が平切りタイプの歯ブラシです。

毛の硬さはソフト(やわらかめ)で、

磨き力が強めの方に向いている歯ブラシです。

- 一切ムダがないコンパクトなヘッドと細くて長いネックだから、奥歯の奥までピッタリ届いて口腔内の操作もラクラクです
- 耐久性があり水はけのよいPBT毛材採用で、口腔内でも弾力性を維持してくれます
- 厚みのあるグリップは握りごちバツグン



医療器具ではない歯ブラシに初めて滅菌処理をしたのはタフト24です。工場出荷時に12時間のガス滅菌処理をし、安心をお届けしています。



ナイロン毛材と比較して4.2倍の耐久性をもつP.B.T.毛材を使用。水分の浸透が少なく、口腔内でも弾力性を維持します。

ルシェロ 340円(キャップ付き 370円)

ルシェロは患者さんの口腔内に合わせて毛の硬さだけでなく植毛デザインまで最適化したブラシを歯科医師、歯科衛生士が「処方」(選択)できるという全く新しいコンセプトの歯ブラシです。

また、前歯部よりも寿命が16年短いと言われる臼歯部をいかに磨くかを追求して設計されました。

自宅でルシェロを使ってみがきにくい奥歯を中心にケアしながら、歯科医院での定期的なプロのクリーニングを受ければ、むし歯や歯周病対策も万全です。



B-10S/M



P-10S/M



OP-10S/M



- ハンドルからブラシにかけて緩やかにカーブを描く形状により、歯列に沿った自然な角度で歯面にフィットします
- 口を大きく開けなくても奥歯の裏側やみがきにくい持ち手側の奥歯まで簡単にブラシが届きます
- 持ちやすさを追求した独自のルシェロフォルムで、ハンドルの反りにより軽く握るだけで高いフィット感が得られます

B-10(ベーシック)

短い毛、長い毛が組み合わさり短い毛が歯面に長い毛が歯間部に当たり、横みがきした場合、平切り歯ブラシの2倍以上に歯と歯の間に入るとされています。

「健康な歯肉～軽度の歯肉炎」に適した歯ブラシです。

P-10(ペリオ)

長い毛が歯間歯の間のみならず歯周ポケットにまで入り込み汚れを除去します。

「軽度～重度の歯周炎に罹患している口腔内」や「インプラントの周囲など」を清掃するのに適した歯ブラシです。

OP-10(オペレーション)

歯ブラシの角の部分落としてあり、歯肉に負担をかけないソフトな設計になっています。

「重度の歯周病」「外科処置後の創傷のある歯肉」「歯周病の急性発作」の際に適した歯ブラシです。

歯ブラシ

ルシェロ (ピセラ)

290円



ピンク ブルー グリーン イエロー パープル

P-20M

みがける歯ブラシ『ルシェロ』に10代の方・女性の方のための『ピセラ』が登場。

●コンパクトヘッド

成人男性より小さめの10代や女性のお口や歯列にフィットする大きさのヘッド。

●コンパクトハンドル

10代や女性の手の大きさにフィットするハンドルサイズ。

●デザイン

10代はもちろんのこと大人の女性にもフィットするデザイン。

P-20M

歯間だけではなく歯周ポケットにも毛先が入りやすい!

大人の女性のためのコンパクトなテーパー毛歯ブラシ。

- 健康な歯肉の方の歯周病予
- 歯肉炎～軽度歯周炎の炎症改善
- 歯周病治癒後のメンテナンス

歯間ブラシ


プリート歯間ブラシ

630円



- ハンドル材質にエチレンプロピレンゴムを使用、すべりにくく弾力性もあり安定した操作が出来ます。
- 患者さんの歯間や使用部位により、選べるSSS～LLLの5サイズ。
- 携帯に便利なコンパクトサイズ。
- 一本ごとキャップ付きなので、毛先を守り衛生的に保管します。
- 残数もわかるおしゃれなケース付きです。

子供用歯ブラシ

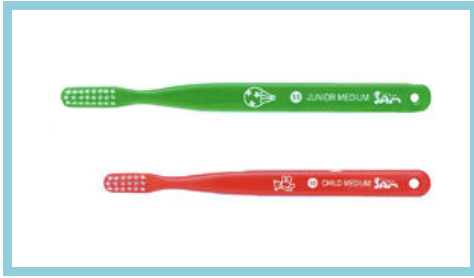

サムフレンド 100円

- 子供の口や手の大きさに合わせた設計で無理なくみがけます。かわいいイラスト入りです。

#10 チャイルドミディアム(0~6才)

乳歯の生えはじめから6才位までの子供の歯を考えて作られました。毛の長さも短く広がりにくいのが特徴。

#11 ジュニアミディアム(6~12才)

混合歯列期のプラークコントロールに理想的なヘッドです。ヘッドをわずかに内側へ傾斜させることによりブラッシング圧が効果的に伝わります。



EXコドモ 252円

- 子供のさまざまな握り方に対応できる新設計太めのラウンドハンドルです。



13M 乳幼児用(0~6才)



12M 混合歯列後期用(5~9才)

乳幼児歯ブラシ



赤ちゃん歯ブラシLOVE 1,050円

- 自分で歯磨きのできない乳幼児のために、指サック状になった母親用のユニークな歯ブラシです
- お母さんの指につけて赤ちゃんのお口の中を清掃します(歯が生え始めた頃)



ベビートゥースブラシ 800円

- ブラシを水で濡らし、赤ちゃんに噛ませておくことで、歯と歯肉を清掃することができます
- H型のヘッドは微細で柔らかなブラシ状になっており、ブラッシングすると同時に乳歯が生える際のむずがりを緩和します
- まだ歯が生えていない乳児の口の中にベビートゥースブラシを入れることで、歯ブラシに慣れさせておくことができます

音波ブラシ

プリニア 9,975 円



低研磨性&フッ素配合

「音波&電動歯ブラシ用歯みがきペースト」付き

4つのこだわりを持った音波振動歯ブラシ

●リニア音波振動で理想的なブラッシングをサポート

毎分 31,000 回のリニア音波振動により振幅 1mm の往復運動を高速で行うことにより、手みがきより短時間で効率的にプラークを除去し、歯の表面をツルツルに仕上げます

●ポイントみがきに最適な「ワンタフトブラシ」

カーブネックになっていて奥歯まで届きやすく、全体的なブラッシングに適した「カーブフロートブラシ」に加え、ポイントみがき用として「ワンタフトブラシ」もラインナップ。通常の歯ブラシではみがきにくい細かなところにもブラシを当てることができるので、特にむし歯になりやすい「歯と歯の間」、「歯と歯ぐきの境目」、「歯並びが悪いところ」、「矯正装置の周辺」などのブラッシングにおすすめです。

●選べる3つの振幅モード「ノーマル」「ソフト」「スーパーソフト」

ノーマル(振幅 1mm)…通常の歯みがき

ソフト(振幅 0.7mm)…初めて音波ブラシを使う方に

スーパーソフト(振幅 0.45mm)…歯ぐきが痛い時や炎症がある時に

●女性の方にも持ちやすい計量、コンパクト設計

持ちやすい計量とコンパクト設計により、ご自宅ではもちろん、お勤め先でのお昼の歯みがき等にも、気軽にご使用いただけます。便利な携帯用ケース付き。

ソニックケア 17,640 円



歯と歯ぐきのケアのための最上級の歯ブラシ

●ソニックテクノロジー(音波技術)による優れたプラーク除去

ソニックケアは歯科医院で歯間ポケットや歯間のプラークや歯石を除去するため超音波スケーラーにヒントを得て開発されたものです。ソニックテクノロジーの生み出す液体流動力によって発生するキメ細かい力強い水流が、手動の歯ブラシや反転式または回転式の電動歯ブラシでは取り去ることのできないプラークを除去します。この液体流動力が、歯ぐきと歯の間のプラークも簡単に取り除きます。

●歯と歯ぐきにやさしいブラッシング

ブラシの毛先が毎分 31,000 回の超高速振動で液体流動力を起こし、左右 5mm の幅広い振れ幅の組み合わせでブラシの毛先が直接歯をブラッシングすることで、手みがきより多くのプラークを、短時間で除去します。また、ソニックケアのブラシは歯と歯ぐきにとってもやさしく設計されており、ブラッシングの際必要以上に力を加えて押しつける必要がありません。

●2段階のスピード切替機能

必要に応じて、ブラッシングパワーを Max スピードまたは Gentle スピードに切り替えることができます。

Max…通常のブラッシングに

Gentle…敏感な部分や歯肉マッサージに

●お口の健康に対する投資

お口の健康に注意し、必要なオーラルケアを心がけることは、十分な見返りをもたらしてくれます。それによって歯科医にまったく行かなくてよくなるわけではありませんが、ソニックケアを使えば、歯肉炎や歯周病だけでなく、むし歯ですら予防することが可能です。

ワンタフトブラシ



ピーキュア 290 円

- 細く長い毛先は、歯肉の中等度から重度の部位を優しくいたわりながらプラークを落とすことができます
- ブリッジやインプラントなどの複雑な部位にも毛先が届くので最適です
- 耐久性に優れた PBT 毛材を採用
- 力が入りすぎず微妙なコントロールのできるグリップと最後臼歯遠心もラクに届く長い柄で簡単にみがけます

こんな部位に…

ペリオ、ブリッジのポンティック、インプラント、根分岐部

デンタルフロス



ルシェロフロス 310 円

- マイクロファイバー(極細繊維)の応用により実現した高いプラーク除去能力！プラークを繊維内に絡め取りしっかりと除去します
 - やわらかな使用感で、歯肉を傷つけず快適にケア
 - 「アンワックス」と「ミントワックス」の2タイプをご用意
- アンワックス(プラーク除去専用)…プロフェッショナルケアに最適なアンワックスタイプ <ケース色:白>
- ミントワックス…歯間に入れやすいワックスコーティングを施し、患者さんのセルフケアに最適
- <ケース色:ピンク、グリーン、イエロー、パープル>

デンタルフロス



REACH デンタルフロス 525 円

- 指に巻いて使用する糸タイプで、歯ブラシでは落としきれない歯間の気になる汚れを除去するデンタルフロスです
- しなやかなナイロン糸で、歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目にたまりやすい歯垢をやさしくきれいに掃除します
- ノーワックスタイプです



DENT.EX ウルトラフロス 210 円

- 前歯から奥歯までの確にコントロールができる Y 字型ホルダーを採用したフロスです
- 摩擦抵抗力の小さな新素材「テクミロン」にわずかなたるみをつけたことで、どんなにきついコンタクトにもスムーズに入り込み汚れを落とします
- 「テクミロン」の持つ高耐久性により、繰り返し使用できて経済的です
- フロスの太さは歯間コンタクトの状態に合わせてMタイプとSタイプの2種類

歯みがき剤



チェックアップスタンダード

525 円

- フッ化ナトリウム(950ppmF)とキシリトール配合の歯みがき剤で、フッ素が再石灰化を促進し、むし歯の発生・進行を予防します
- 高分散性ソフトペーストと使用後の少量洗口法(Check-Up法)を可能にした低発泡・低香味により、口腔内にフッ素が保持されやすく長時間のブラッシングが可能です
- マイルドピュアミント香料でほのかな爽快感



チェックアップコドモ

263 円

- フッ化ナトリウム(950ppmF)とキシリトール配合の歯みがき剤です
- 高分散性ソフトペーストと使用後の少量洗口法(Check-Up法)を可能にした低発泡・低香味により、口腔内にフッ素が保持されやすく長時間のブラッシングが可能です
- かわいい絵柄で、香味は3種類
うさぎ・・・ストロベリー
ねこ・・・アップル
いぬ・・・マイルドフルーツ



チェックアップフォーム

1,050 円

- きめ細かいフォームタイプだから、使用量が少なくても効率的なフッ化物応用が可能です
- 極めてマイルドな香味と研磨剤無配合で、すすぎが苦手な乳幼児や寝たきりの高齢者にもおすすめです
- フォームタイプはソフトペーストよりもさらに少量洗口が可能です



キャナリーナ 900Pw

630 円

- NaF をフッ素濃度として、900ppmになるよう効果的・安定的に配合
- CPC(塩化セチルピリジニウム)の抗菌力とあわせて、むし歯・歯肉炎を予防し、口臭を防止します



キャナリーナ 100(子供用)

630 円

- NaF と CPC を配合
- 甘味料はキシリトールとソルビトールの併用でう蝕(むし歯)細菌増殖抑制効果を増強
- お子様に安心してお使いいただくため、研磨剤無配合、合成着色料無添加です
- 幼児・小児用として安全性を考慮した必要最小限度の NaF(フッ素濃度 100ppm)を配合
- 選べる香味はマスカット、ストロベリー、アップルの3種類



プロスペック歯みがきペースト

525 円

- フッ素 900ppm とキシリトール配合で、歯質の再石灰化を促進、むし歯を予防し、口腔内の健康を幅広くサポートします
- 塩酸クロルヘキシジン(殺菌効果)、グリチルリチン酸ジカリウム(消炎効果)で研磨剤の配合を低く抑えています
- ブラッシング指導に適した低研磨性、低泡性、低香味です



ルシェロペーストマステント 1500 円

- 歯周病予防のために、ギリシャの伝承ハーブ「マスティックエッセンス」を配合
- 歯肉をしっかりと磨ける低発泡性
- 合成甘味料、発泡剤、防腐剤など使用していない自然派歯みがき剤です

効能・効果

- 歯周炎の予防
- 歯肉炎の予防
- 口臭の予防
- むし歯を防ぐ
- 歯を白くする
- 口中を浄化する
- 口中を爽快にする



メルサージュ ヒスケア 950 円

- 知覚過敏で歯がしみるのを防ぐのに有効な「硝酸カリウム」と「乳酸アルミニウム」をダブル配合し、知覚過敏を強力にブロックします
- むし歯予防に有効なフッ素(フッ化ナトリウム)900ppmとキシトールを配合し、加えて歯周病に効果のあるβ-グリチルレチン酸も配合した歯の健康をトータルで考えた歯磨剤です
- スタイン除去効果のある清掃剤のシリカと結晶セルロース、ヤニを落とすマクロゴール400を配合し、ホワイトニング後でも着色を継続的に予防します
- さわやかなソフトミント味

洗 口 剤

コンクールF 1,050 円

むし歯、歯周病を予防するグルコン酸クロルヘキシジンが配合された濃縮タイプの薬用洗口液で、口臭の予防にもお使いいただけます。味はスッキリとした後味で、1 日数回洗すれば口腔内をいつも清潔に保てます。



- むし歯・歯周病予防効果
- 口臭防止効果
- 効果が長く続きます(約 12 時間)
- 緑茶抽出成分と1-メントール(矯味剤)の配合で後口サツパリ、スッキリ
- 薄めるタイプなので大変経済的で、お口の症状に合わせて濃さが調節できます

(ご使用方法)

水約 25~50ml(コップ約 1/8~1/4 位)に本剤 5~10 滴を滴下し、よくかきまぜて 1 日数回洗口(口内をすすぐ)して下さい。

こんな方に…

- むし歯・歯周病予防に
- 就寝中の細菌繁殖を気にしている方に
- 食後のプラークコントロールに
- 口臭予防に
- 歯列矯正中の方には特におすすめ

★ 口臭が気になる方に ★

Dr.Bee 薬用ハイザックシリーズ (口臭防止剤)

健康な歯茎 歯周病の予防に！

有効成分1★アラントインク rolヒドロキシアルミニウム

【抗コラゲナーゼ作用】

…細胞増殖性と収斂作用により、歯周組織をコラゲナーゼから守り、歯周病を予防します。

有効成分2★ε-アミノカプロン酸 【抗プラスミン作用】

…プラスミンを抑制し出血傾向の緩和と抗炎症作用を示し、歯周病を予防します。

有効成分3★塩化セチルピリジニウム 【殺菌作用】

…殺菌作用により歯肉炎、むし歯の発生及び進行、口臭を予防します。

さわやかな息 いやなニオイをスッキリケア

【口臭抑制効果】

お口のニオイ物質 VCC(揮発性硫黄化合物)を抑制します。

輝く歯 光沢のある白い歯に！

【歯の明度のアップ】

歯面をなめらかにして光沢を与えます。

歯の明度がアップして輝く歯に(研磨剤無配合)



ハイザックペースト 1,500 円

- 口臭防止剤のペースト(歯磨剤)です
- 「健康な歯茎」歯槽膿漏、歯肉炎の予防に！
- 「さわやかな息」いやなニオイをスッキリケア
- 「輝く白い歯」光沢のある白い歯に！
- さわやかなハーブミントの香りです



ハイザックNリンス 1,600 円

- リンスタイプです
- 朝のブラッシング後や、外出前、就寝前などに
- オレンジフレーバーの香りです



ハイザックNスプレー 900 円

- 携帯に便利なスプレータイプです
- 外出時でのご使用に！
- オレンジフレーバーの香りです

こんな方、こんな時におすすめします！

- 今までの口臭ケアでは物足りない方
- 口腔内の疾患が原因の口臭でお悩みの方
- 歯周病を予防したい方
- ニオイを抑えたいと思う時に
- お出かけ前・就寝前の習慣に
- 外出先のエチケットに

★ むし歯予防ジェル ★



バナナ レモンティー グレープ ミント

チェックアップジェル 609 円

- 矯正治療中などのむし歯になりやすい方に最適なセルフケア用フッ化物製剤です
- フッ素が口腔内にすばやくいきわたる高分散性で研磨剤無配合、極低発泡の透明ジェル剤です
- 高い使用性で、使用後に1回の洗口が可能です
- ライフステージに合わせて香味は4種類
バナナ(500ppmF)・・・6歳未満幼児対象
レモンティー(950ppmF)・・・6歳以上特に10代対象
グレープ(950ppmF)・・・6歳以上特に10代対象
ミント(950ppmF)・・・成人対象



ホームジェル 700 円

- ホームジェルの主成分であるフッ化第一スズを毎日使い続けることで、むし歯の発生および進行が98%抑えられることが世界的に認められています
- フッ化第一スズは体内に蓄積されないのので体にやさしく安心
- スズイオンが歯肉炎の原因菌の発育を抑え、歯肉炎を予防
- 寝る前に使うことで菌の増殖を抑えられ、朝起きた時のお口の中はさっぱり、口臭を予防
- キシリトール配合の自然な甘さで、好みに合わせて選べて楽しい6種類のフレーバー

★ ミネラルパック ★



MIペースト 1,570 円

- ブラッシングの後で歯面に塗布するだけで、カルシウムとリンを高濃度で口腔内に供給するミネラルパックです
- 豊富なミネラル(カルシウム、リン)と、口腔内環境の中和作用や緩衝作用を持つCPP-ACP(リカルデント)を配合
- CPP-ACP(リカルデント)により酸性になった口の中を中性に戻します
- 予防を続けていただくためにこだわった飽きのこない5種類のフレーバーをご用意



メロン ストロベリー バニラ ヨーグルト ミント

※本製品には牛乳由来成分が含まれておりますので、牛乳由来成分にアレルギーを持つ方は使用しないでください

★ 家庭でできるフッ素ケア ★



レノビーゴ フッ素配合スプレー 1,200 円

- グリチルリチン酸ジカリウム配合のフッ素イオンスプレーです(フッ素イオン 100ppm)
- フッ素イオンが歯のエナメル質表面に丈夫なフルオロapatiteを作り、むし歯を予防します
- 歯周病予防や、歯を白くし光沢を出す力があります
- ほとんど無味無臭ですが、わずかにレモンの香りと甘味があり爽やかな使用感です
- 歯ブラシで歯をみがいた後、レノビーゴを歯ブラシにつけて仕上げみがきのように使用します
- 歯の生え始めた乳幼児から大人の方までご使用頂けます



ミラノール フッ素洗口剤
黄色 500 円 ピンク 700 円

- フッ化ナトリウム11%
- 白色の顆粒で、水を加えて軽く振り混ぜると容易に溶けて無色・芳香性の洗口液となります
- 洗口液が歯の隅々まで早く行きわたるように、また、歯へのフッ素の取り込みを促すように調整されており、むし歯予防をより効果的にします
- 薬液を口に含み約 30 秒間薬液が歯面に行きわたるようにブクブクうがいします
- 約3ヶ月分です

黄色(未就学児用)1g…200mlの水に対してフッ素濃度 250ppmF

ピンク(学童児用)1.8g…200mlの水に対してフッ素濃度 450ppmF

★ 矯正治療中の方に ★



ムーシールド 15,000 円

- 反対咬合治療を目的とした歯列矯正材料です
- 3~4歳の反対咬合に使用します
- 約1年間継続させて使用します
- ムーシールドを装着することによって顎が正常に成長するよう促します
- 舌圧と口唇圧のバランスを保ちます
- 舌を高位に保つ機能があります



リテーナーシャイン 840 円

- リテーナーシャイン顆粒はリテーナーのプラークコントロールのために開発された専用のリテーナー洗浄剤です
- タンパク分解酵素によるすぐれた洗浄力でリテーナーのいやな臭いや汚れを取り除きます
- 顆粒状で水(温湯)にも素早く溶けるため、短時間でも汚れを強力に落とします
- 矯正装置を構成する金属にも優しい顆粒です

★ 入れ歯をご使用の方に ★



ライオデントハブラシ 525 円

- 硬めとやわらかめの2種類の毛を植毛した、入れ歯清掃用ブラシです
- 朝晩2回磨くことで、入れ歯特有の臭いや汚れを除去します
- 普通の歯ブラシで清掃されても構いませんが、専用ブラシは使い勝手が良くておすすめです

茶色の毛…少し硬めで入れ歯の金属部分を磨くのに適しています

透明の毛…少しやわらかめで、入れ歯全体を磨くのに適しています



クリーンソフト 880 円

- 軟質リライニング材専用入れ歯洗浄剤です
- 軟質裏装材の面荒れを防止し、デンチャープラークを強力に洗浄します
- 金属の部分を傷めることなく使用することができます
- 本剤を用いて、每晚就寝中に洗浄保管してください

★ その他（おやつ類） ★



歯科専用 キシリトールガム

ボトルタイプ 950 円 ラミチャックタイプ 250 円

- 甘味料としてキシリトール 100%使用
- 歯の主成分であるリン酸カルシウム、フノランを市販品より多く配合
- むし歯の原因となる酸を作らず、再石灰化が有利に働きます(1日4回2週間の継続で効果有り)
- 入れ歯や矯正装置にもつきにくいガムベース
- 咬む力をつけるため市販品より2倍の硬さになっています
- <ボトルタイプ> (90粒)
 - アップルミント味、マスカット味、クリアミント味
- <ラミチャックタイプ> (21粒)
 - アップルミント味、マスカット味